

VTGM Moderna Vaccin

Materialen geleverd door het RIVM

Botte optreknaalden van 1,2 x 40 mm
BD Blunt Fill needle 18Gx1 1/2" ref 303129



Toedieningspuiten
BD Plastipak Syringe, 1 ml LS ref 303172



Sol-M blunt fill needle, 18G1 1/2" LSM110022



Sol-M luer lock syringe, 1 ml LSM180001PP



Optrekspuiten

BD Emerald Syringe, 3 ml LS ref 302986



Toedieningsnaalden van 0,6 x 25 mm
BD Eclipse needle 23G x 1# ref 305892



SOL-M luer lock syringe, 3 ml LSM180003



Sol-Care safety needle, 23G x 1" LSM2310



Instructie VTGM stappen

Moderna COVID-19 Vaccin 100 microgram = 0,5 mL

1

Voorbereiding

NB Vaccin in de vaccinflacon (onaangeprikt) is 12 uur houdbaar bij kamertemperatuur (8 tot 25°C).

NB 2 Vaccinflacons mogen - na aanprikken - beperkt vervoerd worden (optreknaald eerst verwijderen) mits beschermd tegen licht en overmatig schudden. Zie voor meer info de uitvoeringsrichtlijn.

NB 3 De combinatie naald-spuit is bij voorkeur van dezelfde producent. Dat zal niet altijd haalbaar zijn. Let op: de veilige toedieningsnaald (23G) van BD past niet op de toedieningsspuit (1 ml) van Sol-M met luer lock.

- Zorg voor een leeg en schoon werkblad (zie evt **VTGM werkwijze in afbeeldingen**)
- Desinfecteer handen en zet de benodigdheden binnen handbereik;
 - 1 Vaccin flacon (5 ml)
 - Optreknaald 18G (1x)
 - Toedieningsspuit 1 ml (10x)
 - Veilige toedieningsnaald 23G (10x)
 - Naaldencontainer
 - ZSA afval vat (gele ton)
 - Desinfectans (alcohol 70%) plus gaasjes voor desinfectie van de rubberen dop, indien deze meerdere keren met een naald doorboord wordt.
- Trek niet-steriele handschoenen aan

Inspectie inhoud vaccin flacon

- Expiratiedatum (na ontdooien = 30 dagen, zie de omdoos)
- Evt glasbreuk
- Kleur Moderna in ontdooid vorm: wit tot gebroken wit.
- Het vaccin kan witte of doorzichtige product gerelateerde deeltjes bevatten.

Draai – voor gebruik - de flacon voorzichtig een aantal maal om LET OP NIET omkeren of schudden!



2



3



Rood flip-off-kapje vaccinflacon verwijderen

- Werkwijze: **no-touch** principe
- Verwijder rode Flip-off-kapje (zonder de rubberen dop aan te raken) NB de rubberen dop is al steriel.

4




Vaccin optrekken

- Haal de toedieningspuit (1 ml) en optreknaald (18G) uit de verpakking
- Koppel de eerste toedieningspuit (1 ml) op de optreknaald (door te draaien of te duwen)
- Trek **0,5 mL vaccin-oplossing op** in de toedieningspuit
- Laat het volume controleren

NB Bovenkant van de naaldconus NIET aanraken!

5

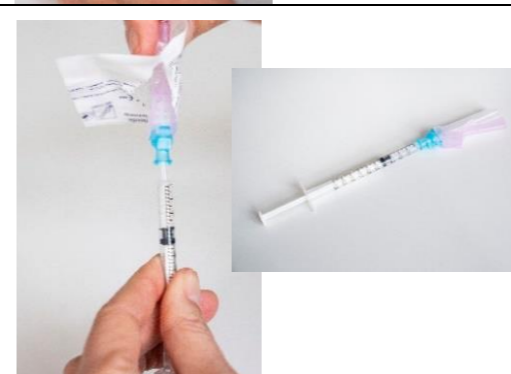

Toedieningsnaald op toedieningsspuit zetten

- Toedieningsspuit loskoppelen van de optreknaald.
- De optreknaald blijft achter in de flacon.
- De veilige toedieningsnaald (23G) op de toedieningsspuit bevestigen. Je hoort een kleine klik.
[Trek evt. een luchtbel van ca 0,05 ml op en zorg dat deze aan de kant van de stamper zit]
- De toedieningsspuit is nu klaar voor gebruik

NB Het vaccin is aangeprikt in flacon of opgetrokken in spuit max 6 uur houdbaar bij 2°-25°C.

6

Direct uitvullen overige toedieningssputen

LET OP Vóór het optrekken van iedere dosis uit de flacon, de vaccinflacon **eerst een aantal maal voorzichtig ronddraaien**.

NIET omkeren of schudden!

- Herhaal stap 4 & 5 voor de overige toedieningssputen
- Er mogen **maximaal 10 vaccinaties uit 1 vial** worden opgetrokken

NB Poolen is NIET toegestaan.

7



Verpak de klaargemaakte vaccins

- Verpak de spuitjes met vaccin per tijdvak van de houdbaarheid in een omzak / nierbekken / hygiënebak oid
- Plak de 'te gebruiken t/m' sticker

Voorbeeld apotheek-etiket:

VOOR INJECTIE I.M.	
Ziektehuizen WAZ	MODERNA COVID-19 vaccin 100 mcg = 0,5 ml NIET schudden! Bewaren bij 2-25°C Batchnummer: Houdbaar t/m: dd-mm-jjjj uur Bereiders IN1 / IN2

8

Afleveren van de klaargemaakte vaccinaties

- Overhandig de verpakte spuitjes z.s.m. aan de prikkers

LET OP Eenmaal opgetrokken mag het vaccin NIET worden vervoerd (meegenomen worden op transport naar een andere locatie) Daarom moet het optrekken plaatsvinden op de vaccinatielocatie waar de deelnemers zullen worden gevaccineerd.